



NEWデザイン! 初心者にもおすすめのファーストシート

肩から太ももまで身体の多くを包み込むシートで多くの方がご利用可能なユニバーサルタイプのスリングシートです。車いす上でも敷き込み易く、吊り上げ時に圧迫を生じにくい形状で、装着の失敗が少なく安心してご利用いただけるので、初めてリフトを使用される方にもお勧めです。



4つのこだわり設計

01

独自製法*で 優しい肌ざわり

スリングシートのために生地から製造。適度な伸縮性があるのが特徴で、特殊なトリコット製法*を用いた独自の生地編みにより、従来品に比べて非常に柔らかく、利用者にも優しい肌ざわりの良い生地となっています。

02

入浴にも最適な生地

水をほとんど含まない繊維を使用し、水抜けと肌触りの良さを考慮した素材をスリング専用素材として生地から製造しています。

03


らくらくフィット設計 手順が簡単で スマートに装着

生地表面の摩擦を軽減し敷き込みやすく、臀部の覆いを最小限に抑え装着手順を簡易にしました。初心者にも扱いやすくお勧めします。

04

安定した姿勢を保持

敷き込みやすいだけでなく、同時に快適な姿勢保持を探求しました。適度に生地が伸縮することで体にフィットし、骨盤上部にテンションをかけることで座位姿勢が良くなり安定します。姿勢がくずれにくく生地からの圧迫感をなくしました。利用者に負担なく快適な乗り心地を提供できます。

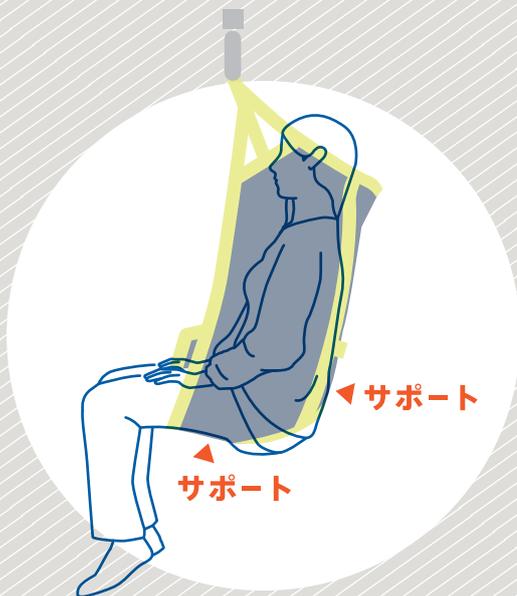

サイズ	SS	S	M	L
身長 (cm)	110~140	130~160	150~170	160~180

※このサイズ表はあくまでも目安です。

SS → WN-4010-SS
S → WN-4010-S
M → WN-4010-M

L → WN-4010-L

価格 **52,000** 円
(税抜価格)

価格 **57,000** 円
(税抜価格)



耐荷重
120kg

首を自分で支える事が
できる方が対象

製品重量：900g
生地：エコテックスニット
素材：ポリエステル繊維
ポリプロピレン繊維

洗濯は湯温 40℃を限度として非常に弱い水流または手洗いで行ってください。漂白剤、乾燥機、アイロン、ドライ・ウェットクリーニングは使用できません。直射日光は避けて日陰で乾燥してください。※スリングシートを消毒したい場合は弊社指定の消毒液をご使用ください。



CARE BED



WHEEL
CHAIR



BATHING

新発想！装着手順が簡単スマート 日本人の骨格や体形に優しくフィットするシリーズ誕生

4 ウェル・ネット研究所の こだわりのこだわり設計

01

独自製法※で
優しい肌ざわり

02

入浴にも最適な生地

03

らくらくフィット設計
手順が簡単で
スマートに装着

04

安定した姿勢を保持

※独自の生地編みトリコット製法とは？

この編み方することで、他素材との柔軟性と伸縮性のバランスがとれ、柔らかく肌触りの心地よい生地に仕上がります。



肩から太ももまで身体の多くを包み込むシートで多くの方がご利用可能なユニバーサルタイプのスリングシートです。車いす上でも敷き込み易く、吊り上げ時に圧迫を生じにくい形状で、装着の失敗が少なく安心してご利用いただけるので、初めてリフトを使用される方にもお勧めです。

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



使用している生地は繊維製品における安全性の国際規格エコテックスを取得。またアメリカにおいては医療機器認証 FDA を取得しています。



世界シェアトップクラスのリフトメーカー数社へ素材供給実績を誇る素材メーカーと独自のノウハウを生かした生地を共同開発しました。

WELLNET.Lab

株式会社 ウェル・ネット研究所

〒664-0871 兵庫県伊丹市堀池 5-1-8

☎072-787-3736 ✉info@wellnet-labo.co.jp

☎072-787-3738

<http://www.wellnet-labo.co.jp>

取扱販売店